



معرفی دستگاه UNT TECH EMSCULPT

۱: دستگیره های کاری: ۴ دسته با ۲ اندازه مختلف.

۲: مقیاس چربی بدن: ۱

۳: حالت تکنیک: ۳ گزینه. EMS; EMS+RF; RF

۴: حالت های کار: ۷ انتخاب. خودکار، L، M، H، هر کدام با ۲ انتخاب.

۵: سیستم عامل اندروید، روند بازار

۶: ۲ سال گارانتی و نگهداری تمام عمر


۷: صندوق لگن اختیاری، به ۳۰۰ دلار اضافه نیاز دارد.

تفاوت بین ما و سایر تامین کنندگان چیست؟

۱: سیستم عامل اندروید چه مزیت‌هایی برای ما دارد؟

A: به طور خودکار به روز رسانی
عملکرد، مانند iPhone.

دستگاه‌های ما به روز رسانی خواهند شد. به طور منظم با توجه به بازخورد مشتری، عملکردهای بیشتری را اضافه کنید یا به موقع برخی بهبودها را انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که دستگاه همیشه در پیشرفته‌ترین سیستم برای برآوردن نیازهای مشتریان کار می‌کند.

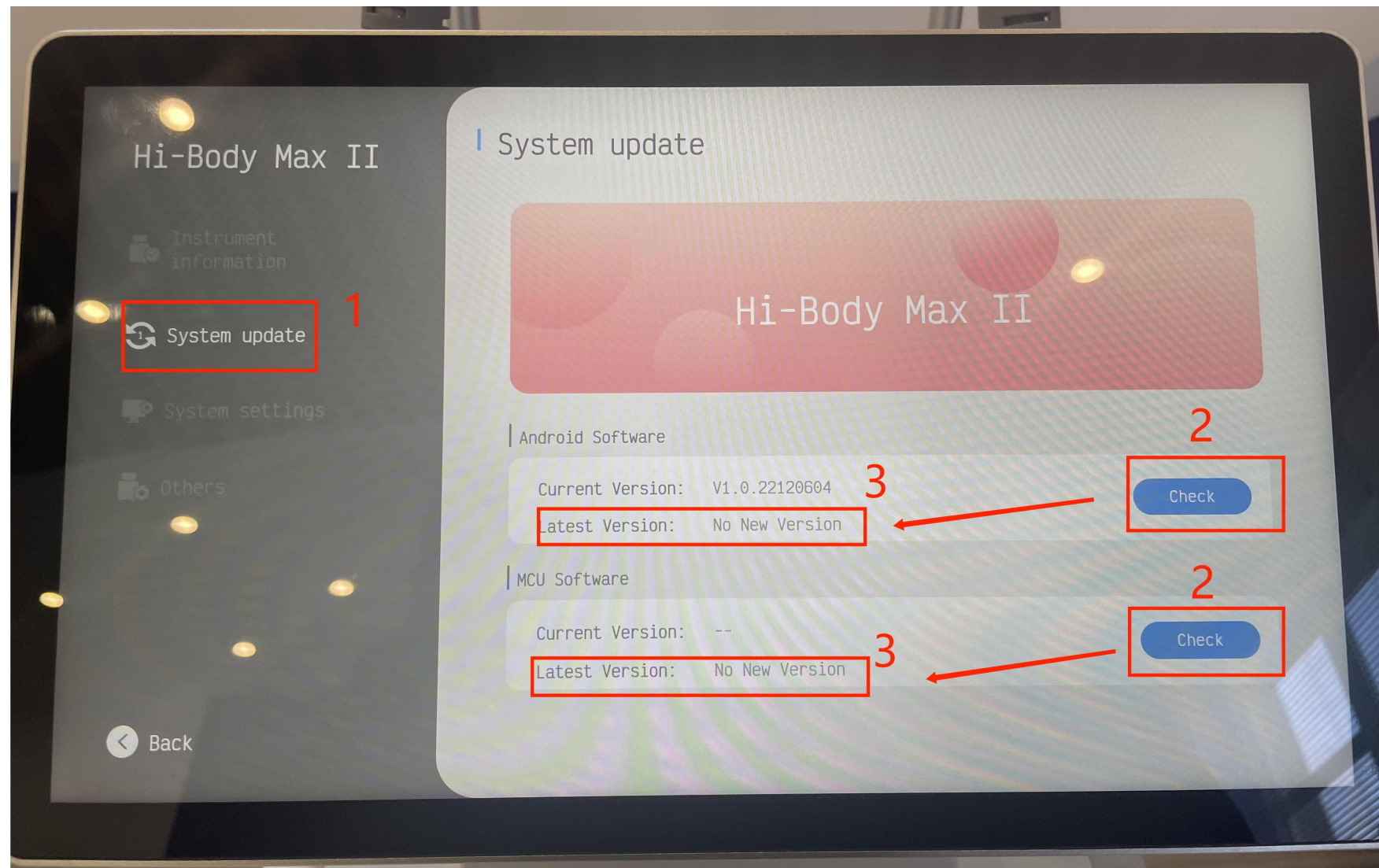

B: پایگاه داده iCloud برای بررسی دستگاه کار می کند وضعیت از راه دور: در مورد کاربران بهتر بدانید، دستگاه، تعمیر و نگهداری دستگاه و پس از فروش.

۱: آگاهی از وضعیت کار دستگاه، استفاده از زمان، استفاده از پارامترها و انرژی. زمانه که مراجعین نیاز به راهنمایی کلینیک دارند، طبق سوابق می توانیم حرفه ای ترین و دقیق ترین کمک را ارائه دهیم.

۲: خدمات پس از فروش را به سرعت انجام دهید. زمانه که دستگاه

غیر طبیعی است، سیستم به طور خودکار نمایش داده می شود



کد مشکل، و کاربر، توزیع کننده، و مهندس ما اکنون اطلاعات را به طور

همزمان به اشتراک می گذارند تا سریعاً دقیق ارائه شود.

کمک. دستگاه های ما به ما کمک می کنند تا با دوران ثبت دست

نویس خداحافظی کنیم و از صرف زمان زیاد برای یافتن مشکلات و

تعمیر ماشین ها جلوگیری کنیم.

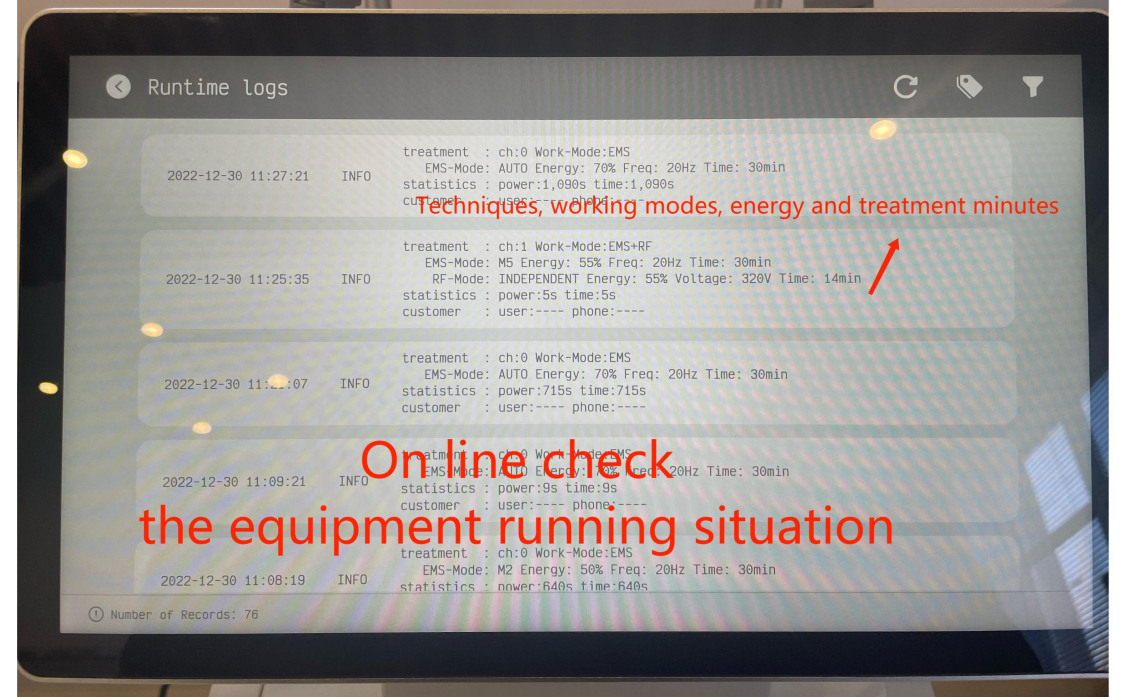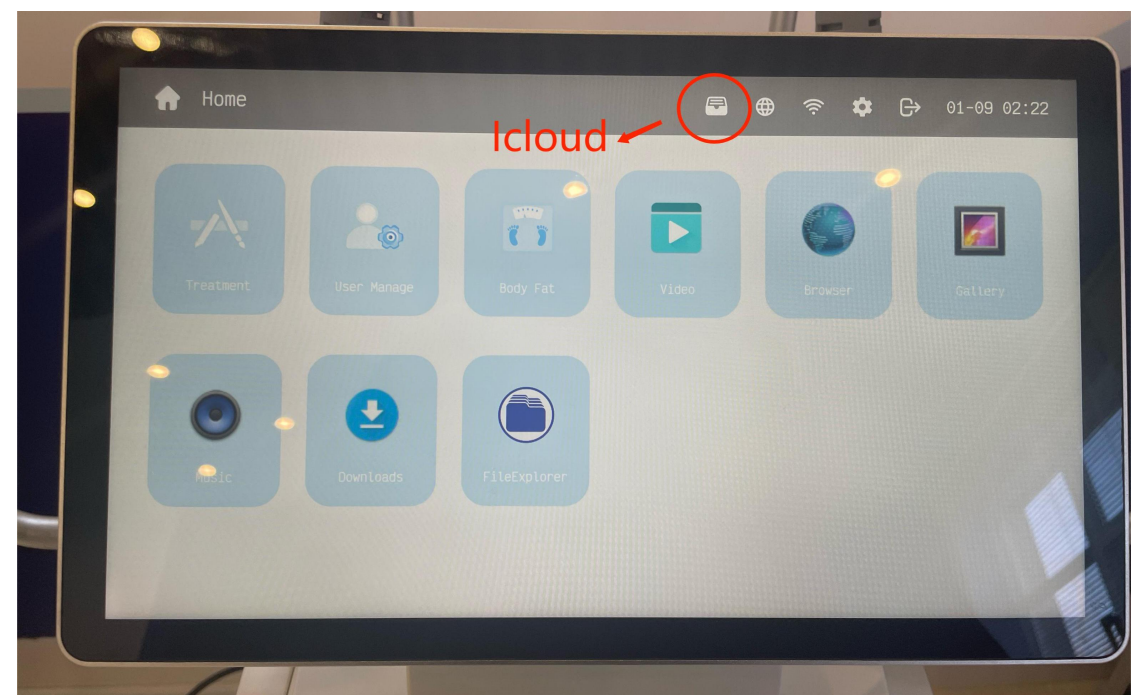

پخش ویدیو و عکس

ج: می تواند نصب را قرار دهد
فیلم ها، راهنمای کاربر و فیلم
های عملیات کلینیک روی
دستگاه، که برای خدمات آموزش
پس از فروش مناسب است.

D: ذخیره قبل از
درمان با تغییر عکس و فیلم برای
نشان دادن موفقیت و کارایی
درمان با استفاده از دستگاه که می
تواند رضایت مراجعین را جلب کند.



۲: سیستم مدیریت مشتریان CRM

مے تواند عملیات کلینیک هر مشتری را با استفاده از پارامترها، دقیقه ها، جلسات و اطلاعات تماس ضبط و ذخیره کند. با آزمایش با مقیاس چربی بدن، تغییر بدن نیز مے تواند به طور خودکار روی دستگاه ثبت شود.

همچنین، چنین اطلاعاتے را مے توان بارگیری کرد یا بین سالن های زنجیره ای / کلینیک ها / سالن های ورزشے به اشتراک گذاشت. OurEMS یک و هوشمند ایجاد مے کند با گذشت زمان خداحافظے با دوران دست نوشته های دستے.

The screenshot displays a user profile page with two main sections: 'User information' and 'Medical records'.

User information:

- Name: 111
- Gender: man
- Birth date: 1980-01-01
- Telephone: 111
- E-Mail: 111@111.com

Medical records:

- 2022-07-06: Treatment machine: HiBodyMax, Treatment part: Arms, Operator's name: admin
- 2022-06-23: Treatment machine: HiBodyMax, Treatment part: Thighs, Operator's name: admin
- 2022-06-23: Treatment machine: BodyFatScales, Treatment part: body, Operator's name: admin
- 2022-06-23: Treatment machine: BodyFatScales, Treatment part: Body Fat Scales, Operator's name: admin



۳: هر هندپیس یا ۲ تکنیک: EMS / RF

دو تکنیک خروجی در یک دسته: EMS و RF. این دستگاه از ۳ حالت کار پشتیبانی می‌کند: فقط EMS، فقط RF یا ترکیبی از EMS + RF. در مقایسه با سفارش ۳ مجموعه از دستگاه‌های تک تکنیک، این یک مجموعه می‌تواند تمام عملکردها را انجام دهد. صرفه جویی در هزینه، و بهبود راندمان کار دستگاه. با توجه به بازخورد بازار و مشتریان، مشتریان بیشتری دریافتند که دستگاه برخی از تاهین کنندگان دیگر RF ندارد. RF فقط حقه آنهاست. از این رو بیشتر به دنبال وسایل خوب هستند و کم به کم به ما دستگاه سفارش می‌دهند. این وعده EMS: RF واقعاً ۲,۵ تسلا، انرژی همان BTL است، می‌تواند به نتایج رضایت بخشی دست یابد. با استفاده از یک منبع تغذیه بزرگ ۴۵۰۰w داده یکپارچه، دستگاه حتی با استفاده از ۲ سال، و می‌تواند اطمینان حاصل شود که هیچ انرژی ضعیف می‌شود.



ع: مقیاس تجزیہ و تحلیل چربی بدن

با بلوتوث، مقیاس چربی بدن به طور خودکار با دستگاه ها ارتباط برقرار می کند. قبل و بعد از درمان، داده های توده چربی، توده عضلانی، شاخص BMI، وزن بدن، درصد چربی بدن، پروتئین و غیره را اندازه گیری و ثبت کنید. این دستگاه با شناخت حرفه ای از وضعیت بدن برای انتخاب حالت های دقیق، کمک می کند. کاربر به طور مستقیم و حرفه ای نتیجه، تغییر و تفاوت ها را مشاهده کند.

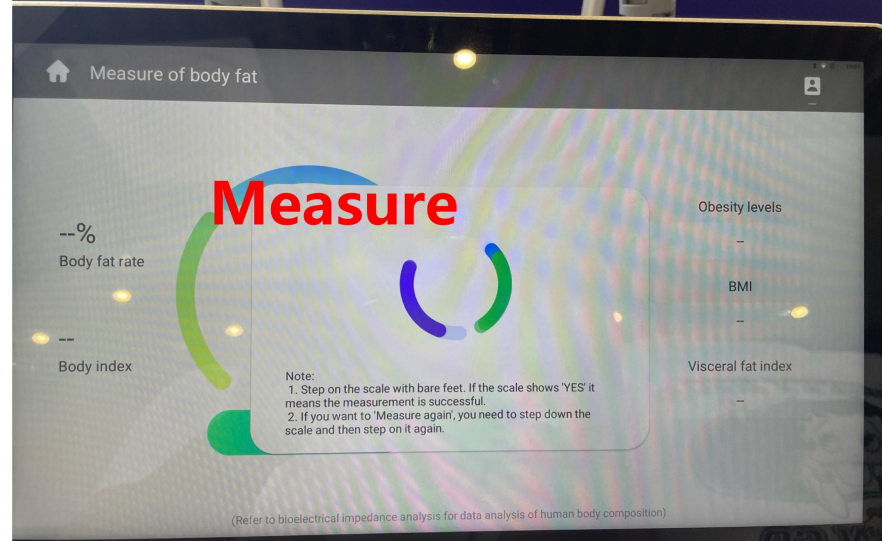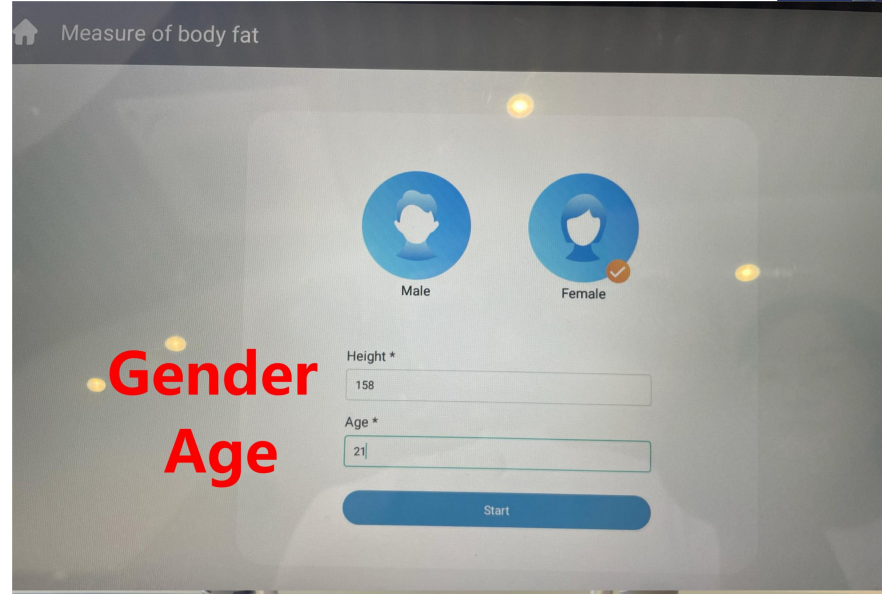


بازخورد کلایت



با استفاده از راهنمایی

مرحله ۱: درمان EMS را انتخاب کنید

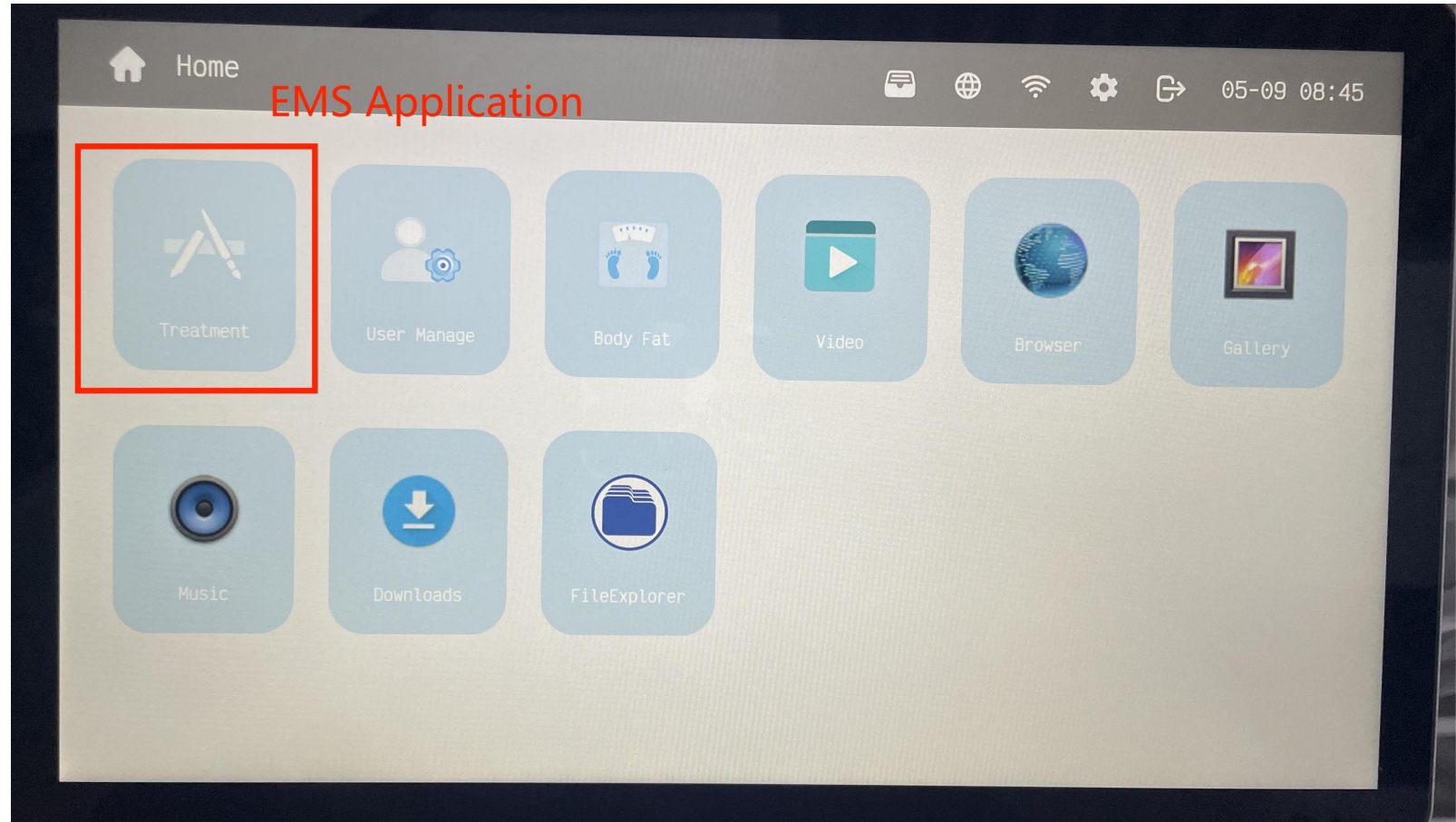

مرحله دوم تایید صفحه مورد نظر

۱: دستگیره های کاری را انتخاب کنید: CH1

یا CH2

۲: منطقه درمان را انتخاب کنید

۳: تکنیک ها را انتخاب کنید: EMS، RF، یا

EMS+RF

۴: حالت های درمانی را انتخاب کنید:


خودکار، کم، متوسط یا زیاد

۵: انرژی را تنظیم کنید

۶: بررسی کنید که آیا توقف اضطراری روشن



یا خاموش است

۷: درمان را شروع کنید

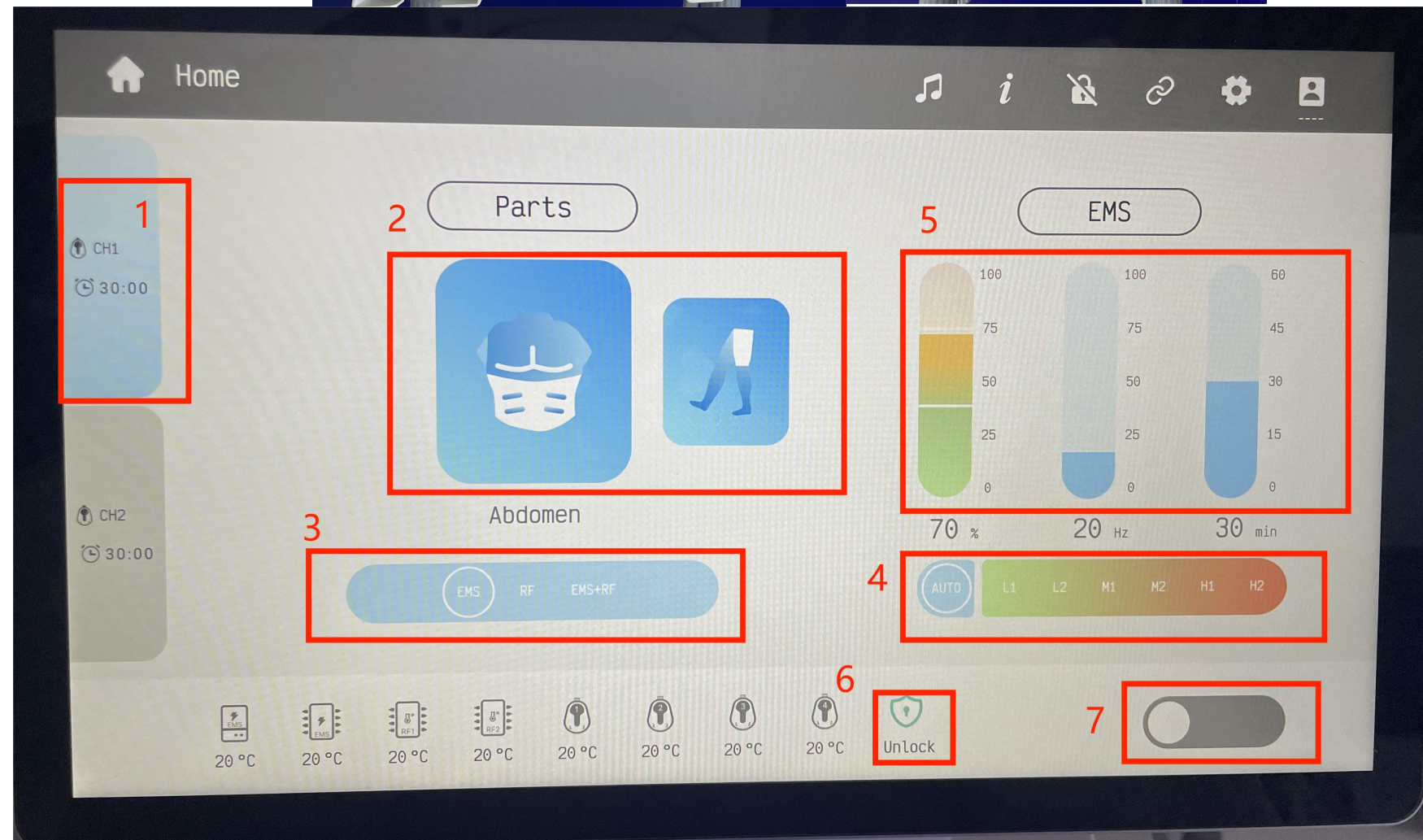

EMS, RF, EMS+RF

در نسل جدید EMS با تکنیک های RF، با توجه به عملکردها/مناطق/مشتریان مختلف درمانه، کاربر می تواند ۳ حالت کار متفاوت را انتخاب کند: فقط EMS، فقط RF یا ترکیبی از EMS + RF. بنابراین عملکرد RF در دستگاه EMS چیست؟ در ترکیب با تکنیک های EMS، ما می توانیم RF را به عنوان گرم کردن ورزشی در نظر بگیریم. RF عملکرد سفت کننده، سفت کننده و لیپولیز را دارد. قبل از درمان EMS، اجازه دهید سلول بدن فعال تر باشد، تا نتیجه مجسمه سازی EMS بهتر و سریع تر شود. علاوه بر این، نتیجه دسته RF این دستگاه با سایر تامین کنندگان متفاوت است. در مقایسه با RF سایر تامین کنندگان، سطح خروجی تنها یک نقطه در یک نقطه است. اما منطقه خروجی RF ما برای کل منطقه است. بنابراین، منطقه کار RF بزرگتر از سایر تامین کنندگان است و نتیجه لاغری ۳ تا ۵ برابر سایر تامین کنندگان است. همچنین دسته کار EMS ما این است که EMS و RF در یک دسته هستند، با استفاده از تکنیک های EMS یا RF می توان در یک دسته کار به دست آورد. اما برای سایر تامین کنندگان، دسته کار دستگاه از EMS و RF با هم پشتیبانی نمی کند. در مقایسه با آن، استفاده از این دسته کار EMS راحت تر است.

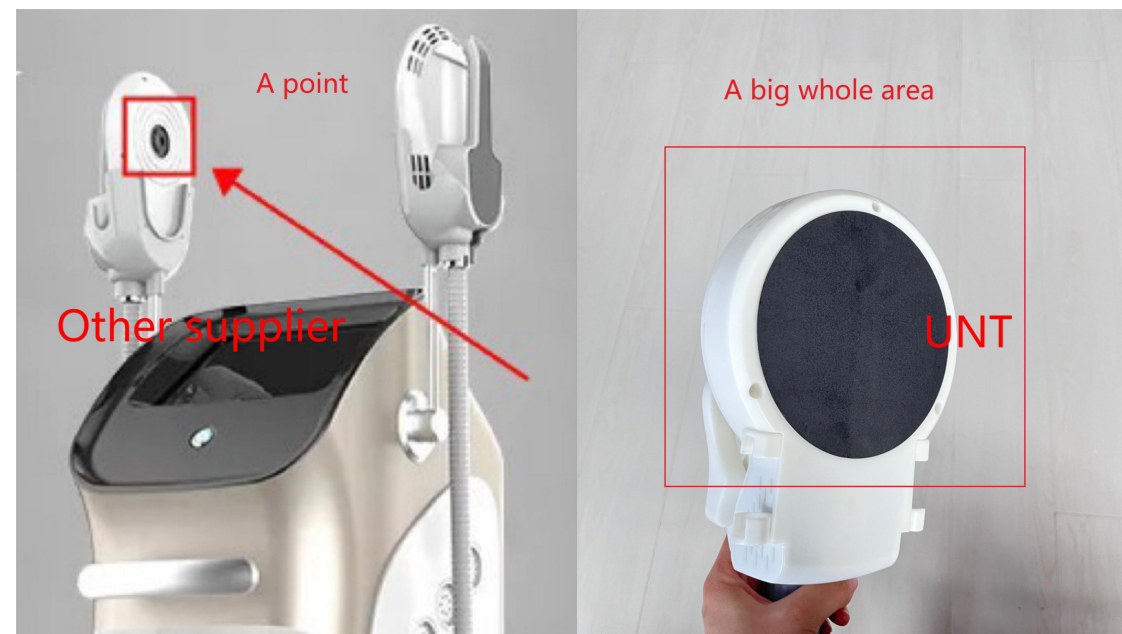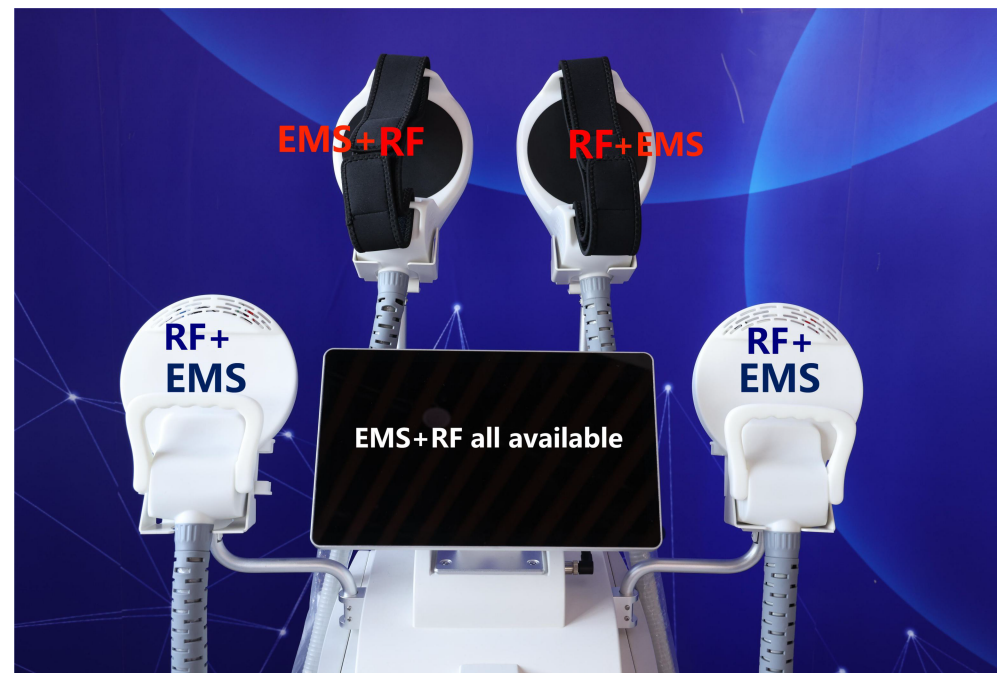


راهنمای RF

وقته حالت های RF را امتحان کنید، بدن بعد از ۲ تا ۳ دقیقه تب را احساس می کند. در اینجا، لطفاً % را خیلی قوی تر نکنید. برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد. اگر حالت های EMS+ RF را انتخاب کنید، همانطور که عکس نشان می دهد EMS یا RF را لمس کنید، می توانید شدت یا زمان کار هر تکنیک را تنظیم کنید.



۷ حالت کار

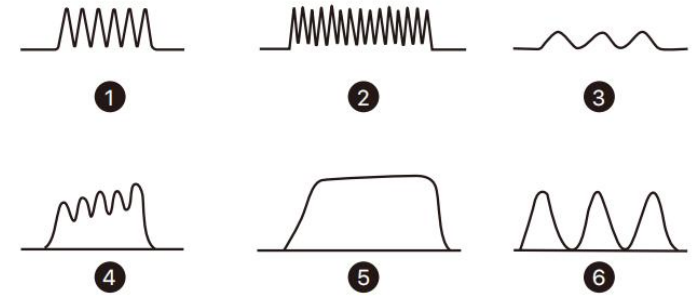

اصل کار EMS تقلید از ورزش برای سوزاندن و کاهش چربی و عضله سازی است. هنگامی که دستگاه کار

میکند، دسته کار می لرزد و عضلات را منقبض می کند. پس چرا EMS خود را انتخاب کنید؟

۱: ۶۰ ثانیه زمان طولانی انقباض عضلانی در ابتدا، این یک روند تکراری است. لرزش و انقباض - استراحت و

توقف. با توجه به حالت های مختلف کار، ثانیه ها متفاوت خواهند بود. دستگاه ما دارای ۷ حالت مختلف کار است و طولانی ترین زمان انقباض عضلانی ۶۰ ثانیه است. طولانی ترین ثانیه های تامین کنندگان دیگر ۴۰ یا ۵۰ ثانیه است.

۲: حالت کار ویژه ۷ منحصر به فرد، حالت کار دستگاه EMS ما در تصاویر نشان داده می شود. ۷ حالت مختلف کار منحصر به فرد می تواند گروه مشتریان

مختلف را ملاقات کند. در حالت های کاری مختلف، انرژی پیشنهادی وجود دارد. در حالت های مختلف، پارامترهای کار به طور دقیق توسط مهندسان ما محاسبه می شود.

همانطور که می دانیم، ساختار بافت انسان و محتوای ماهیچه های بدن متفاوت است، بنابراین انرژی کار می تواند برای آن مناسب باشد

مشتری متفاوت در مجموع ۷ حالت کار خودکار، L، M و H وجود دارد. (L: کم؛ M: متوسط؛ H: زیاد)

EMS ما یک دستگاه بسیار هوشمند و فراگیر است که تمام نیازهای مشتری را برآورده می کند.

۷ حالت کار

EMS وسیله‌ای است که به ما کمک می‌کند تا به جای انجام ۲ ساعت تمرینات زیاد، فقط در هر درمان ۳۰ دقیقه دراز کشیدن روی تخت، عضله بسازیم، بلند کنیم و شکل‌گیری جذاب‌تر داشته باشیم. افراد بیشتر و بیشتری خواهان EMS هستند و درمان EMS به

یک مورد محبوب در سراسر جهان تبدیل می‌شود. در میان

بسیاری از تامین کنندگان، چرا مشتریان؟

EMS ما را می‌خواهید؟

همانطور که می‌دانیم، EMS دستگاهی است که همه افراد با


آن روبرو هستند، اما برای افراد مختلف چربی بدن از جمله

متفاوت است. بنابراین انرژی مناسب متفاوت است. در مقایسه

با حالت‌های درمان تک تامین‌کنندگان دیگر، این EMS دارای ۷

حالت کار مختلف است تا نیازهای واقعی مشتریان مختلف را

برآورده کند و سپس به نتایج سریع دست یابد.

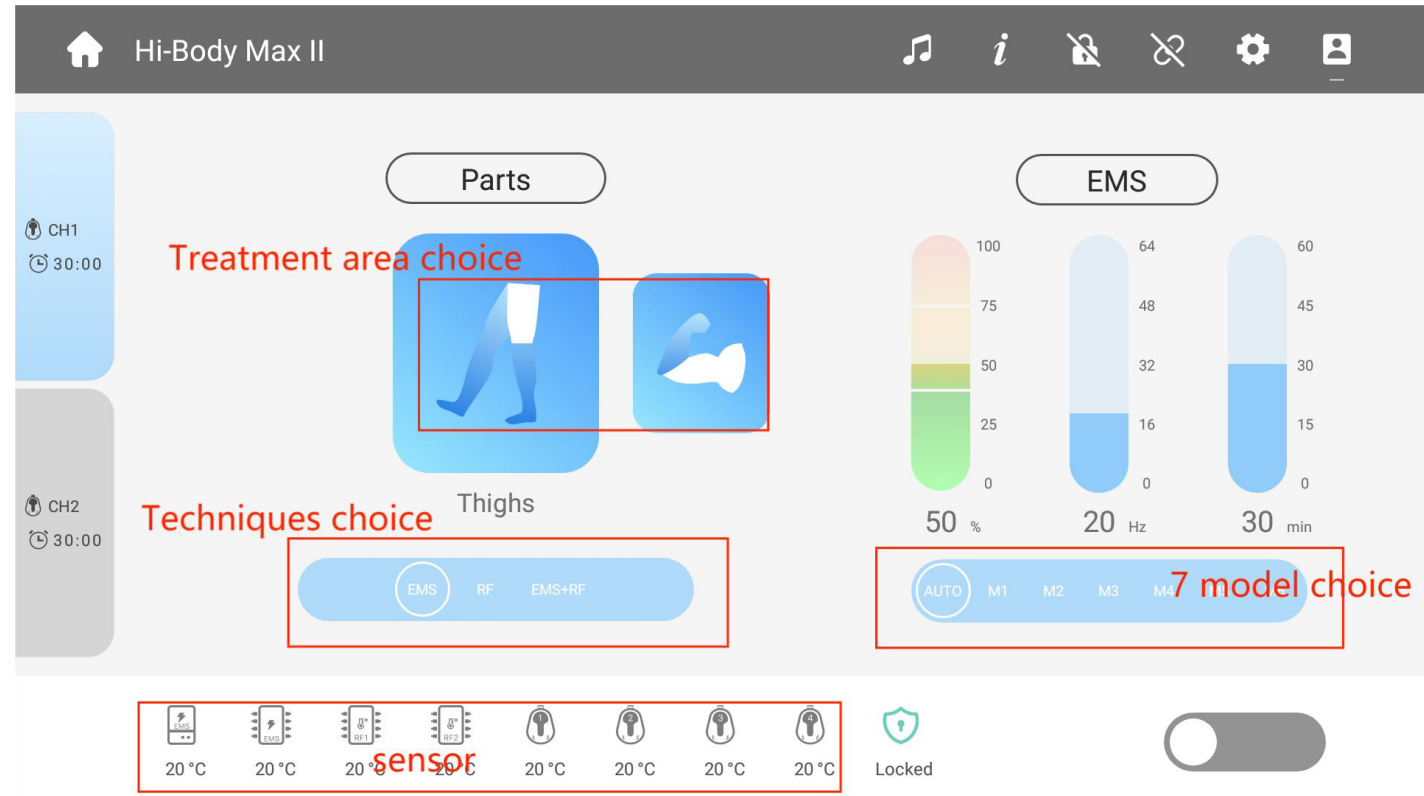

With the 7 unique working systems, what's profits can we get from the EMS?

ج: راحت تر

UNT EMS به نیروی انسانی بیشتری نیاز ندارد. فقط باید پارامترها و زمان هایی را تنظیم کنید که بتواند نتایج واضحی را برای رضایت مشتری شما به دست آورد.


ب: کار درمانی با اندازه های مختلف دقیق تر، به ترتیب با انرژی درمانی حرفه ای، درمان های دقیق تری را بر روی اندام ها و قسمت های بدن انجام می دهد، که می تواند نتایج دقیق تری را برای بلند کردن و لاغری به دست آورد.

ج: جذاب تر EMS ما یک فناوری جدید با تکنیک های انحصاری تحقیق و توسعه است. چنین دستگاه های مختلف برجسته و خاص مشتریان بیشتری را جذب می کند.

D: نتیجه سریع تر چرخه درمان EMS ما کوتاه است، یک هفته می تواند ۲ تا ۳ بار انجام دهد، چنین دستگاهی نه تنها می تواند شما و مشتری شما را به خوبی پیوند دهد، بلکه باعث می شود مشتریان شما یک تجربه بسیار خوب برای به دست آوردن ضرر واضح و سریع ایجاد کنند. وزن و فرم دهی خوب بدن، همچنین اگر در ساعت شارژ شود، مرکز زیبایی شما می تواند سود شگفت انگیزی داشته باشد.


دکمه اضطراری

حتی اگر کلیدی برای کنترل استارت یا توقف دستگاه در نرم افزار وجود داشته باشد. در نظر گرفتن ممکن است گاهی اوقات اپراتور نتواند همیشه با مشتریان بماند، بنابراین یک سوئیچ توقف اضطراری برای مشتریان وجود دارد. هنگامی که مشتری احساس کرد انرژی برای تحمل آن بسیار قوی است، می تواند دکمه را فشار دهد تا دستگاه را متوقف کند. هنگامی که مشتری به تنهایی دستگاه را امتحان می کند، می تواند با کمک آن توقف اضطراری، دستگاه را بسیار راحت کنترل کند.

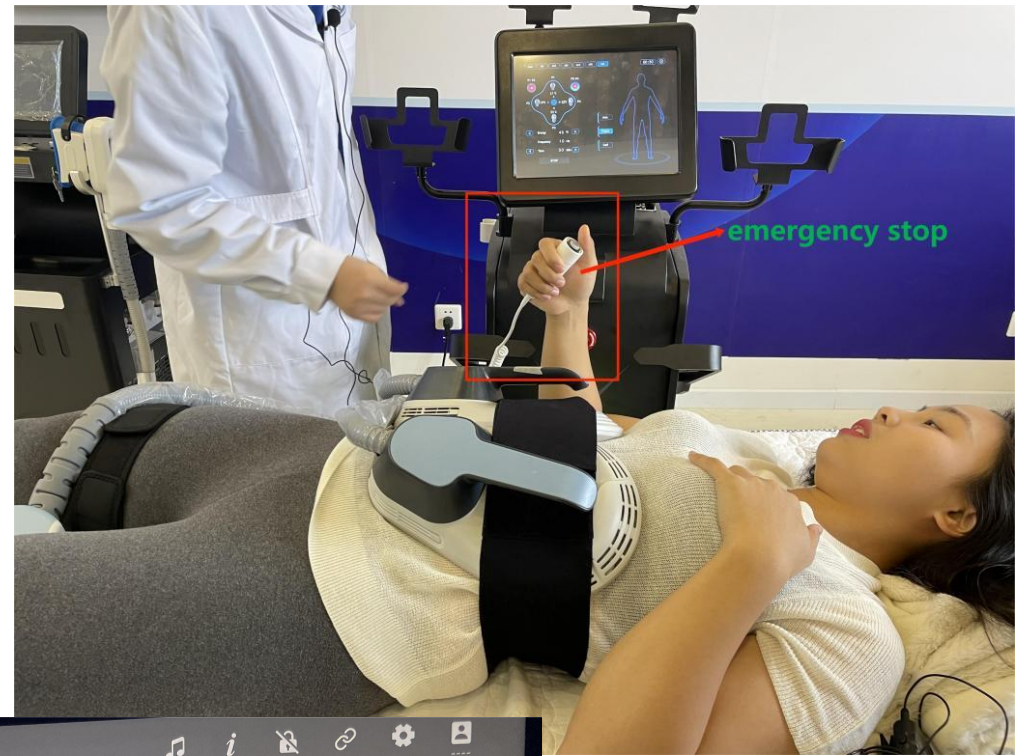

Non-woven fabric

ما ہے دانیم کہ وقتے RF کار ہے کند، چرے ما را ہے سوزاند و پوست ما گرما را احساس ہے کند. بنابراین عرق خواهد کرد. بنابراین، برای تمیز نگہ داشتن آن و ایجاد یک محیط درمانی حرفہ ای، پارچہ نبافتہ ۱۰۰ psc را ارسال ہے کنیم. مانند عکس نمایش آن را روی دستہ قرار دھید.

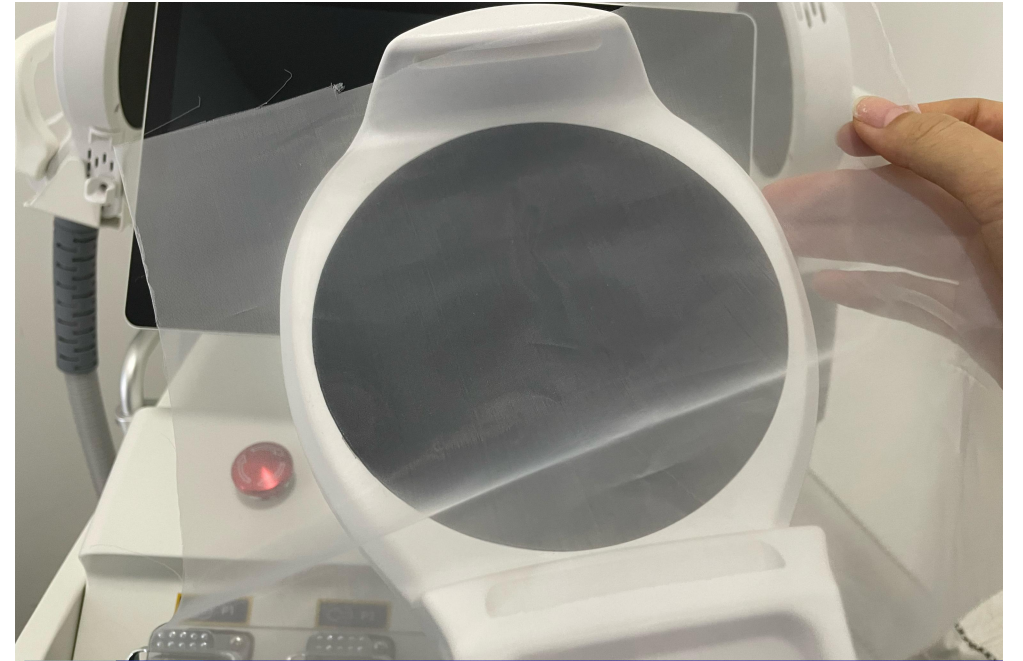

دستگیره کار لینکر ثابت

با ذکر دسته کار، با هدف حل اساسی این مشکل که دسته کار هنگام انجام درمان از باند لیز می‌خورد، یک براکت مخصوص برای تعمیر دسته کار طراحی کردیم تا به بهترین نتیجه مجسمه‌سازی دست یابیم. همانطور که تصاویر زیر نشان می‌دهد.




فیلم عایق PC

برای دسته کار، باید یک وسیله انتقال انرژی پیدا کنیم. در صورت استفاده از پلاستیک، به دلیل ضخیم بودن آن، انرژی RF خروجی ضعیف و ضعیف تر می شود. در صورت استفاده از فلز، ممکن است مشکلات رسانایی یا مشکلات ایمن ایجاد شود. می دانیم که وقتی دستگاه کار می کند، نباید هیچ فلزی در اطراف دسته کار وجود داشته باشد. بنابراین، با توجه به مسائل انرژی و ایمنی، ما فیلم عایق PC را بر روی دسته به عنوان رسانه انتقال انتخاب و اعمال کردیم که نه تنها می تواند نقش انتقال انرژی RF را ۱۰۰٪ ایفا کند، بلکه آن را برای استفاده ایمن نیز عایق می کند. از آنجایی که فیلم عایق PC بسیار نازک است، باید با چسب آن را روی دسته بچسبانیم. بنابراین، برای اینکه پس از استفاده طولانی مدت، ممکن است روی دسته محکم نشود، ما فیلم عایق اضافی رایانه شخصی را برای جایگزینی به شما پیشنهاد می کنیم تا از شما و مشتریانانتان پشتیبانی کند.



سنسور

سنسور برای نظارت بر دمای منبع تغذیه، دمای RF و درمان دما برای دستیابی به ایمنی بیشتر با استفاده از. همچنین، این یک راه خوب برای انجام تعمیر و نگهداری ماشین است.

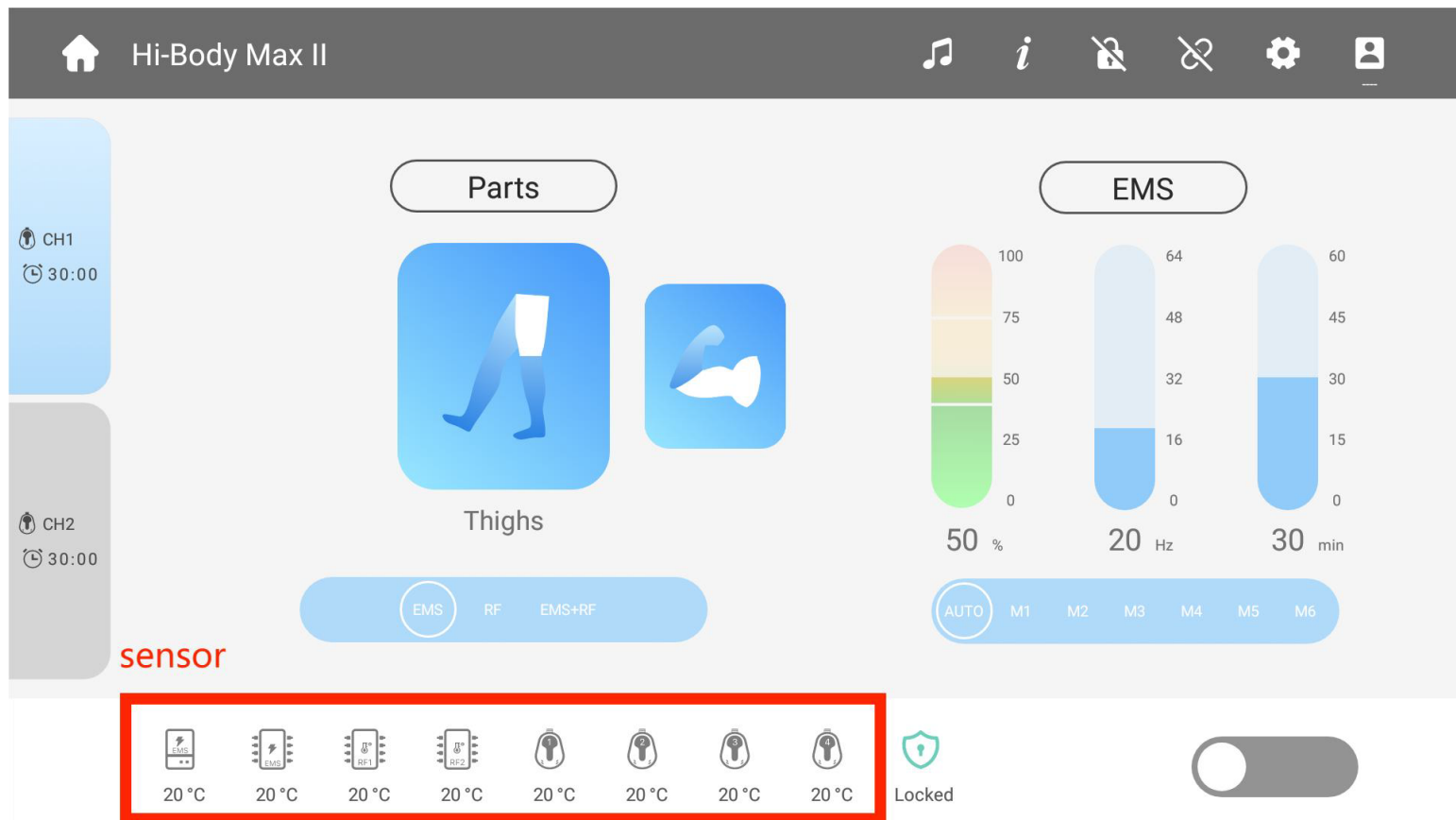

این دستگاه از HIMT پشتیبانی میکند.

پخش زنده یک راه محبوب برای فروش محصولات در حال حاضر است. برای توضیح و معرفی دستگاه، دستگاه را با مانیتور تلویزیون پیوند دهید. همچنین از این طریق نشان دهید و ثابت کنید دستگاه هایی که می فروشید متفاوت، جدید و مفید هستند.

