

NOYAN
Teb Manely

Q-SWITCHED ND YAG LASER - QL IV

- حذف رنگدانه
- حذف خال کوبی
- جوان سازی پوست


WWW.NOYANTEBMANELY.COM



اصول درمان

لیزر کیوسوییچ

چگونه کار می کند

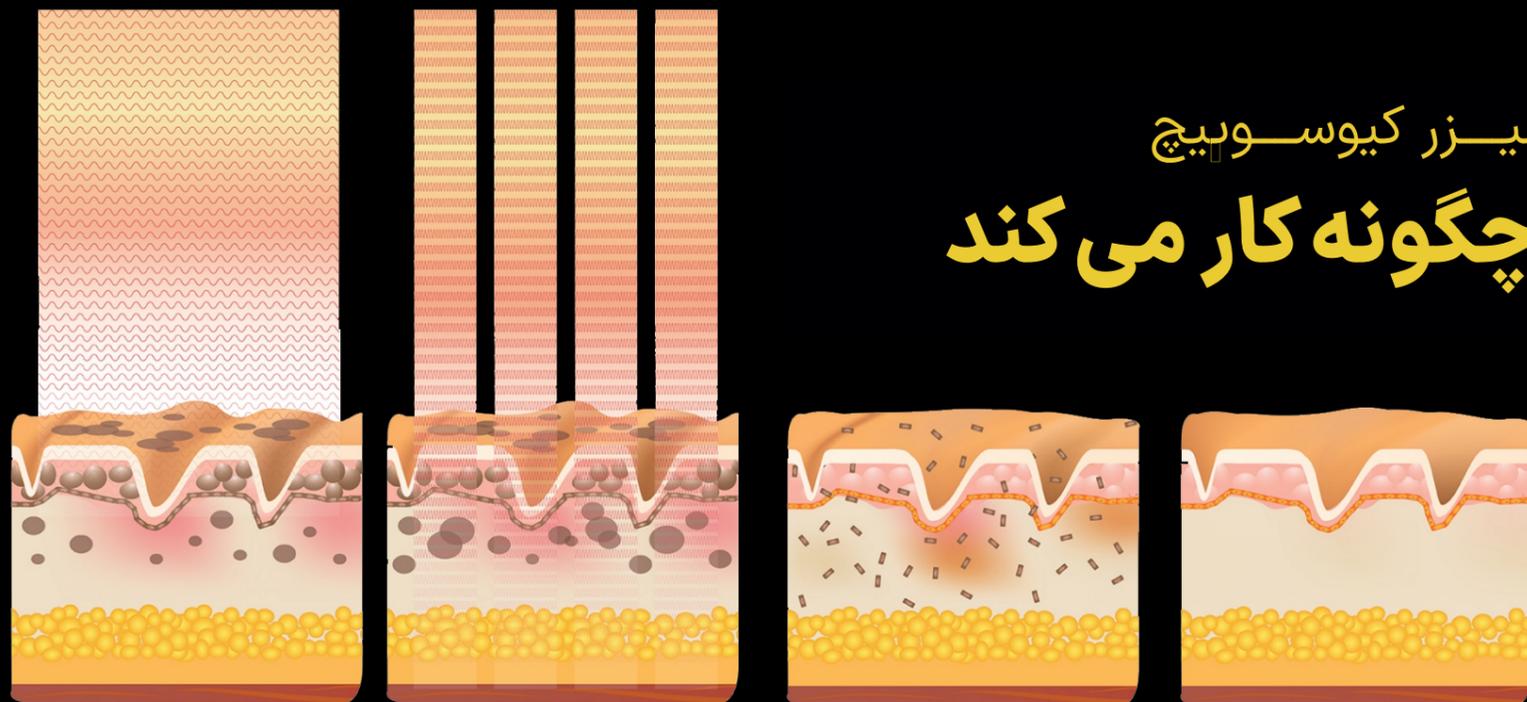

ملانین درون زای بسیار انتخابی لیزرهای Q-Switched به عنوان یک کرکره با سرعت بالا عمل می کند. میله های لیزر انرژی را به مقدار بالایی ذخیره می کنند و آنها را در مناطق آسیب دیده پوست به طور مؤثر ساطع می کنند. پالس های پر سرعت باید از مناطق آسیب دیده در مناطق داخلی از داخل خارج شوند. در نانو ثانیه پالس منتشر می شود و لوبیا برای جلوگیری از هرگونه اثر مضر یکتواخت می ماند.



۴ نوع سر درمان

۴ نوع سر درمانی ، از جمله ۵۳۲ نانومتر ، ۱۰۶۴nm ،
لنز پوست کربن ۱۳۲۰nm ، لنزهای کسری ۷۰۰
نانومتری ، به طور جامع نیازهای درمانی پروژه های
مختلف درمانی را پوشش می دهد



1320nm carbon
peel lens



1064nm



532nm



755nm fractional lens
(optional)

لنز ۵۳۲nm ۱۰۶۴nm

لنز ۵۳۲ نانومتر ۱۰۶۴nm عمدتاً برای از بین بردن رنگدانه های مختلف از جمله خال کوبی های مختلف ، خال کوبی ابرو ، لکه های اپیدرمی و لکه های پوستی استفاده می شود





لنز لایه بردار کربن ۱۳۲۰ نانومتری


پوست لیزر کربن یک درمان لیزر انقلابی است که کاملاً بدون درد است. برای افراد دارای هر یک از مشکلات پوستی زیر بسیار مفید است:

- پوست چرب
- جوش های سر سیاه
- منافذ بزرگ شده
- پوست کدر
- آکنه در سرتاسر صورت و بدن



همچنین این یک روش عالی برای لایه برداری و تازه کردن پوست شما است که ظاهری فوری را ارائه می دهد و باعث می شود پوست احساس نرم تر ، نرم تر و محکم تر کند.



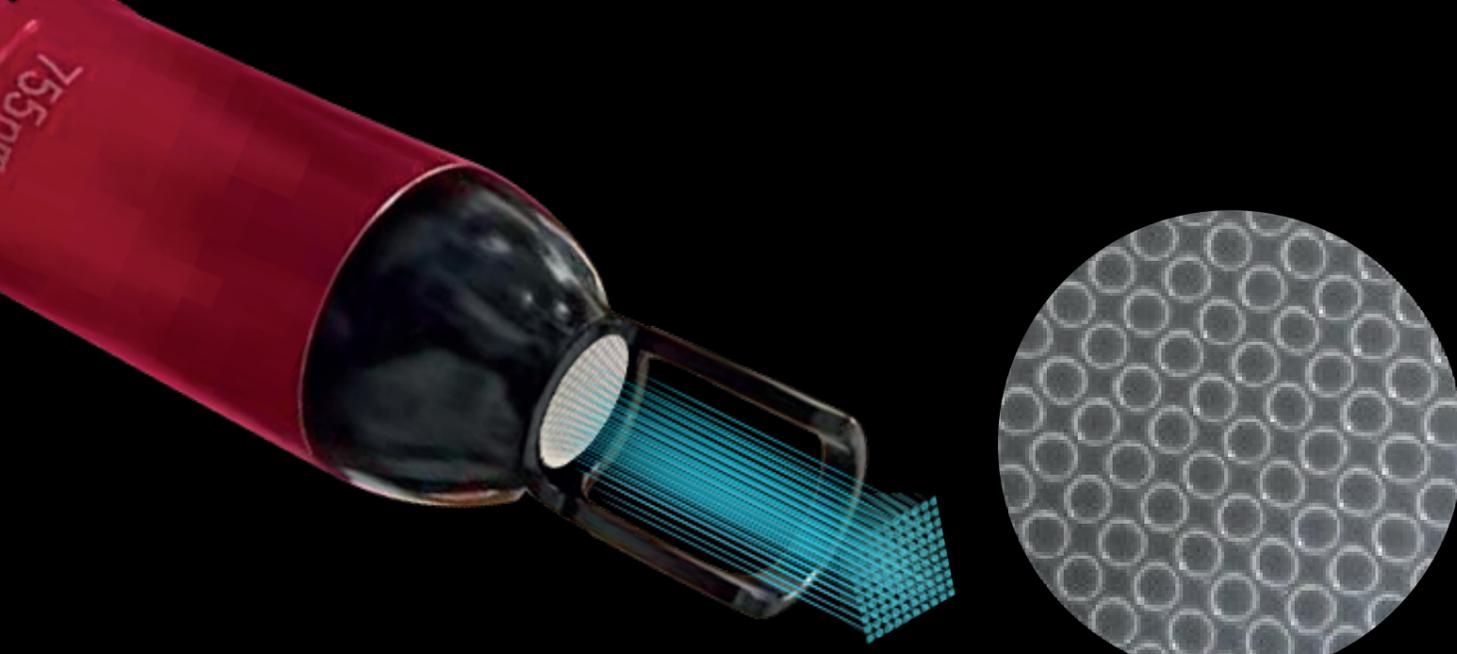

لنز لایه بردار کربن ۱۳۲۰ نانومتری

سیستم تبرید فوی العاده نه تنها می تواند تضمین کند که دستگاه به طور مداوم به مدت ۱۲ ساعت بدون توقف کار می کند، بلکه می تواند از پایداری دستگاه و دسته اطمینان حاصل کند و طول عمر دستگاه و دسته را افزایش دهد.

لنزهای کسری

از لنز کسری استفاده می شود تا زمان تعامل پرتو لیزر با پوست را کاهش دهد. به عنوان افزایش قرار گرفتن در معرض می تواند به پوست نیز آسیب برساند. انرژی لیزر بازیابی سریع بافت های آسیب دیده را فراهم می کند و با رفع الگوی داخلی، سطح پوست را بقویت می کند.

WWW.NOYANTEBMANELY.COM



رود روسی

میله لیزر لوازم جانبی اصلی در دسته است و کیفیت آن به طور مسقیم بر قدرت انرژی لیزر تأثیر می گذارد. به طور کلی، هرچه قطر میله لیزر بیشتر باشد، انرژی بیشتر است. شرکت ما از میله لیزری وارداتی از روسیه با قطر ۷ میلی متر، انرژی بالا و عمر طولانی استفاده می کند

قوی تر
پایدارتر

7Φ




بازتابنده نقره ای

رفلکتور از نقره ساخته شده است که به راحتی اکسید نمی شود، انرژی بالاتر و عمر طولانی تری دارد.



لامپ زنون انگلستان

لامپ زنون انگلستان، قطر ۷ میلی متر، انرژی بالا و عمر طولانی. گارانتی ۵ میلیون شات.

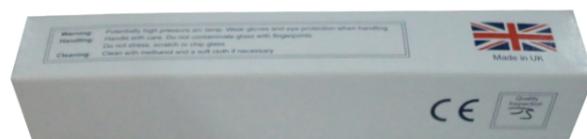



سیستم عامل هوشمند

رابط کاربری هوشمند و حالت، کارکرد آسان و استفاده آسان



مشخصات فنی

قدرت:	800W
انرژی:	300-1000mj
فرکانس خروجی:	1-6Hz
اندازه صفحه نمایش:	8 inch
طول موج:	532nm 1064nm 1320nm
سیستم خنک کننده:	Air +water cooling
وزن خالص:	22kg
بعد، ابعاد، اندازه:	480*420*320mm
اندازه بسته:	615*575*400mm
وزن ناخالص:	32kg
ولتاژ:	AC220V±10% 10A 50HZ , 110v±10% 10A 60HZ

